



Schutzvermerk nach DIN 34 beachten.
Use of the document / contents is forbidden
without express authority. All rights reserved.
DRÄGER WERK A.G. Lübeck

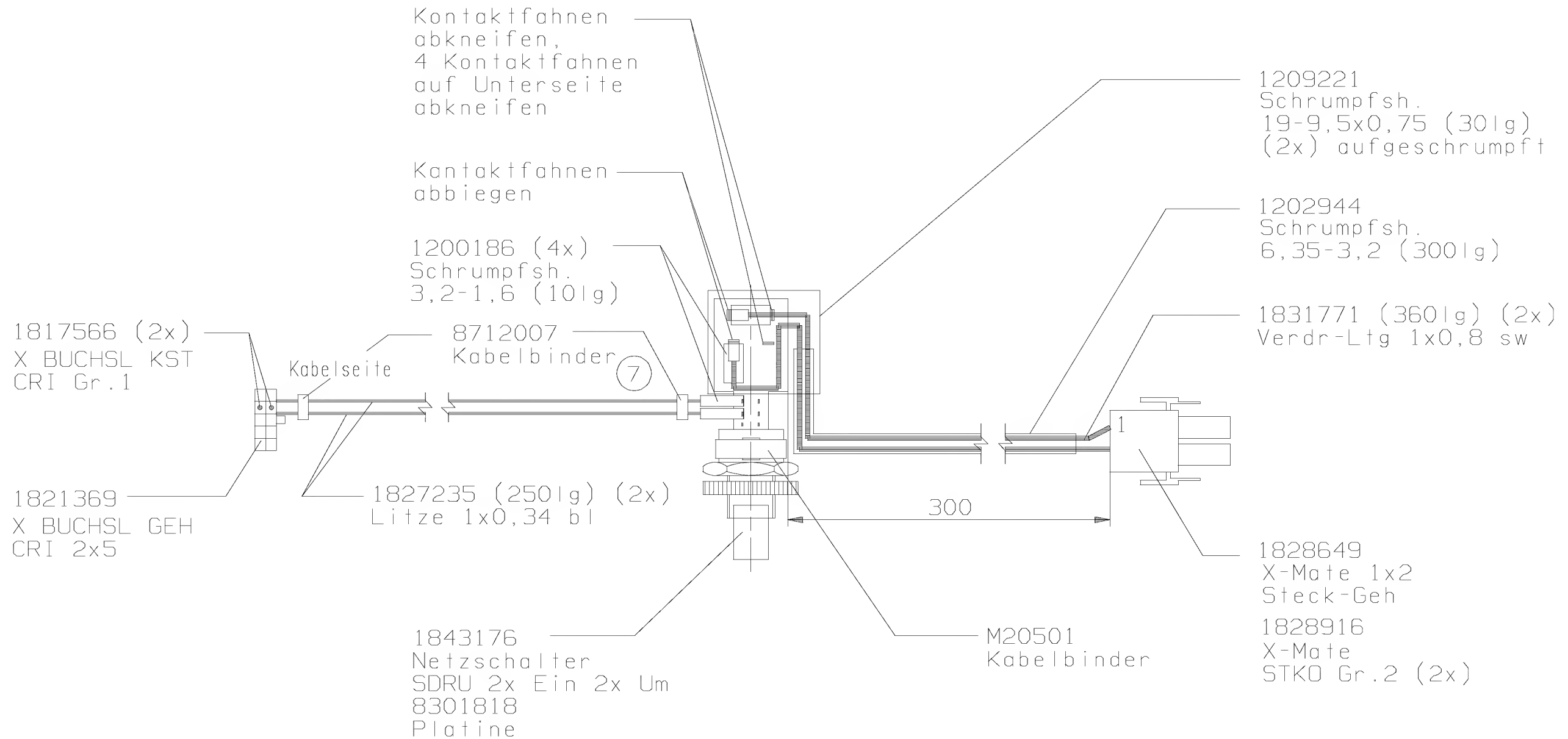

Alle Kabellängen in mm
Ausführung nach DWN 3012

ST2M30143

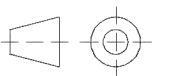


=QA=	--	=QB=	--	=QC=	--
Werkstoff		07		1x	-Kabelbinder neu

					()
		Aend. Ziffer	kommt vor	Änderungen	
Masstab	Allgemein-toleranzen	Abteilung	1997	Tag	Name
1 : 1	----	M2	Bearb.	19.06.	Wie/Sti/Ni
			Gepr.	19.06.	Kanneng.
				--	--
		Benennung			Zeichnungs-Nr.
		Kabelbaum Schalter			2M30143
		PROD CADRA=8			Ersatz fuer 2M30143 06
					Ersetzt durch

Drägerwerk
Aktiengesellschaft

Dräger

Schulzvermerk nach DIN 34 beachten.
Use of the document / contents is forbidden
without express authority. All rights reserved.
DRÄGERWERK AG, Lübeck


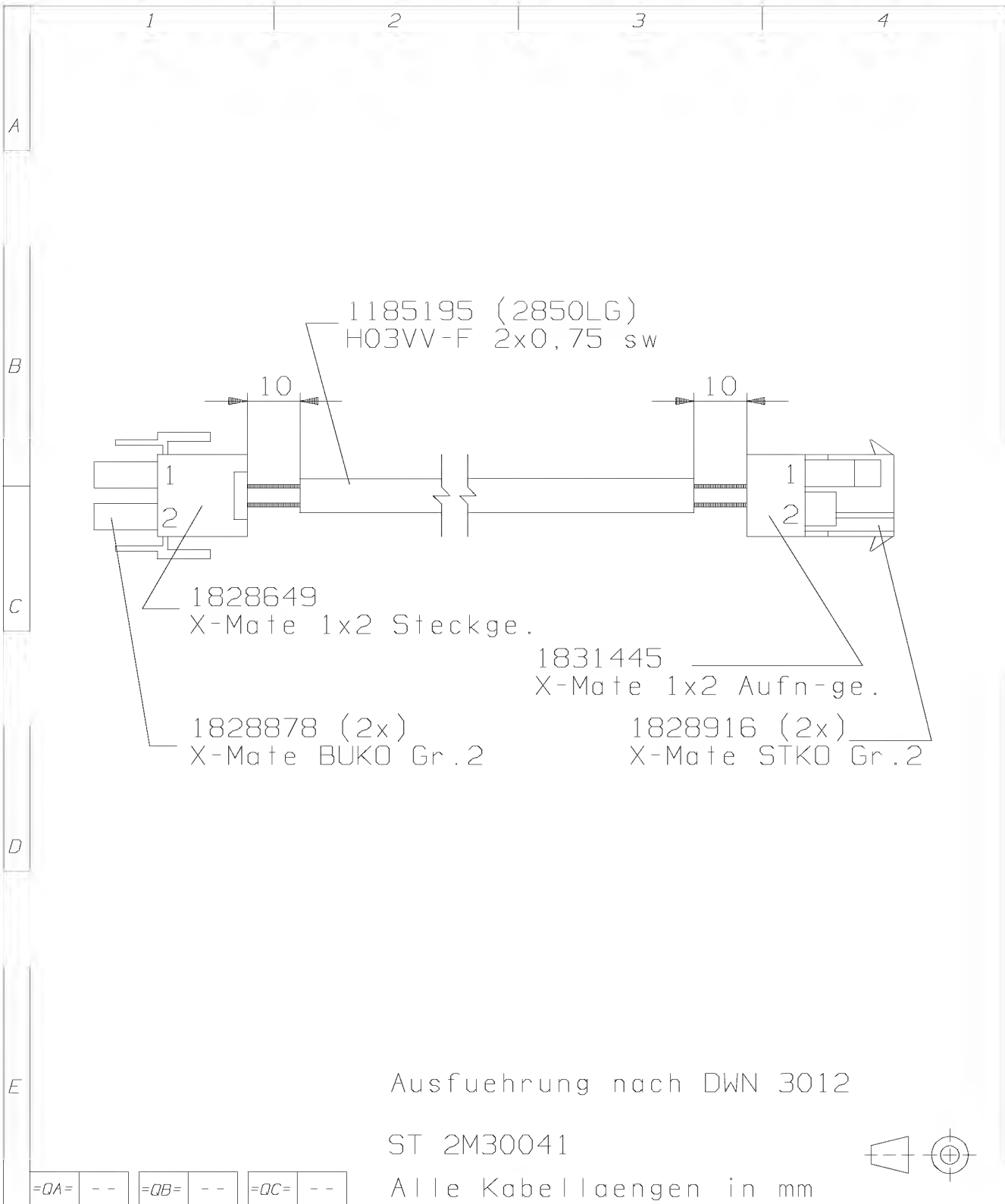


=QA= -- =QB= -- =QC= --

Werkstoff			02	--			

			Aend. Ziffer	kommt vor	Änderungen		
Maszstab	Allgemein- toleranzen	Abteilung	1996	Tag	Name		
---	+/-5	M2	Bearb.	07.06.	Krokowski		
			Gepr.	07.06.	Aval		
						Drägerwerk Aktiengesellschaft	
						Dräger	
			Benennung			Zeichnungs-Nr.	
			Kabelbaum Heizung extern			2M30041	
						Ersatz fuer	
						Ersetzt durch	
PROD	CADRA=8						


Schutz nach DIN 34 beansprucht.
Use of the document / contents is forbidden
without express authority. All rights reserved.
Dräger Medizintechnik GmbH, D-23542 Lübeck

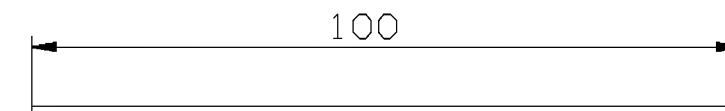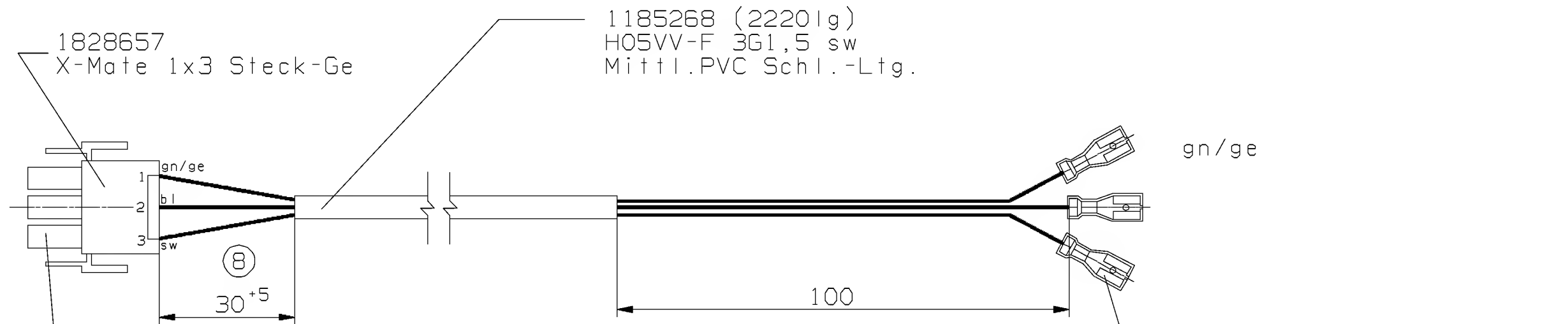

(Kontrollmasz)

Ausführung nach DWN 3012

ST2M30049

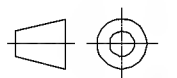


scale 1:1	general tolerances +/-5	material	safety class <s> 0 <m> 0
field reserved	revision text Darstellung geändert, Masz neu	author 05.10.2000 Stickel	approved 05.10.2000 Hartwig
filing dept 2950	responsible dept. 5511	date 05.10.2000 Stickel	contract n
type drawing	language de	title Kabelbaum Netz extern	(2000 / CC / 414)
replacement for 2M30049-04	number 2M30049	revision index 08	page / of 1x / 01/01
cooling system CADRA	release status RELEASED	revision index 08	page / of 1x / 01/01

Dräger


Dräger Medizintechnik
GmbH,
D-23542 Lübeck

size A3

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten.
Use of the document / contents is forbidden
without express authority. All rights reserved.
DRÄGER WERK A.G. Lübeck

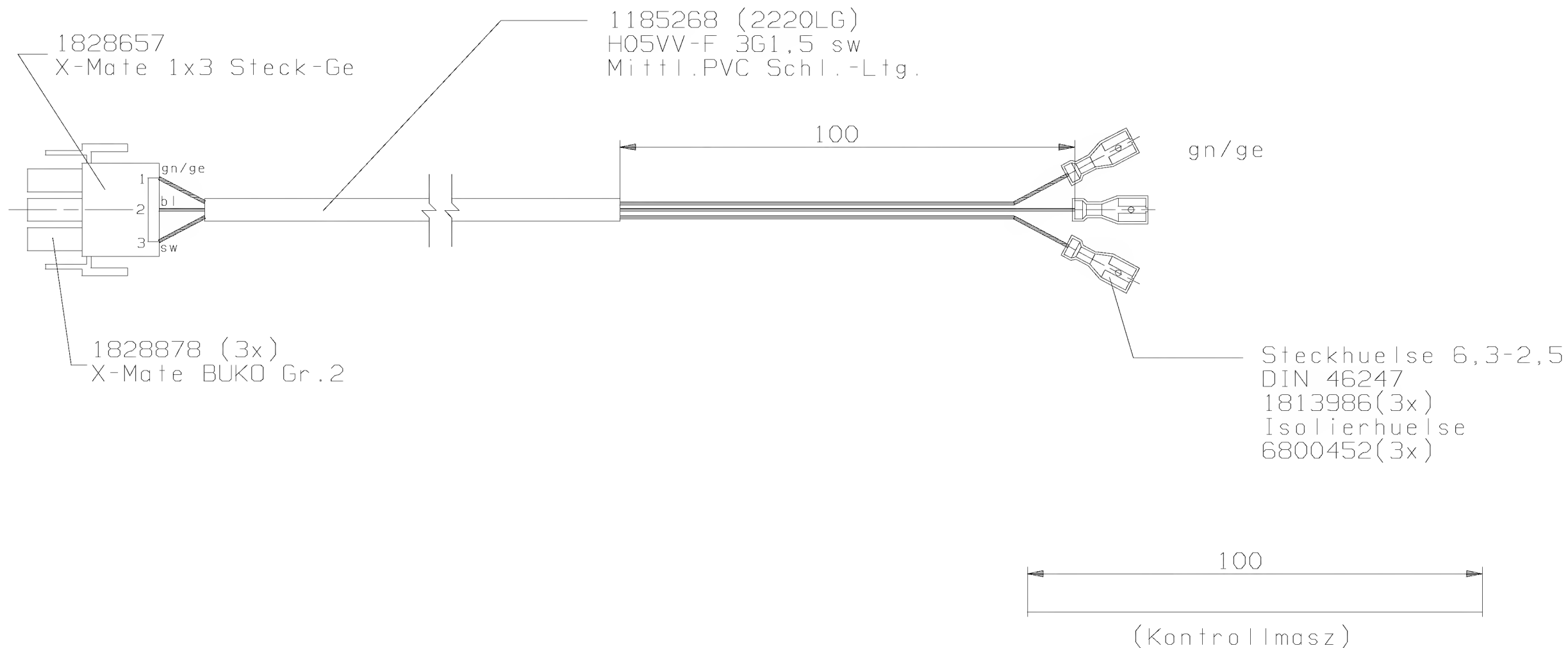

=QA=		--	=QB=		--	=QC=		--				
Werkstoff												
---										04		
										()		
										Aenderungen		
Maszstab		Allgemein- toleranzen		Abteilung		1996		Tag		Name		
1 : 1		+/-5		M2		Bearb		25.02.		Kroko/Sti.		
						Gepr.		25.02.		Aval		
								--		--		
Benennung										Zeichnungs-Nr.		
Kabelbaum Netz extern										2M30049		
										Ersatz fuer		
PROD										Ersetzt durch		
CADRA=8												

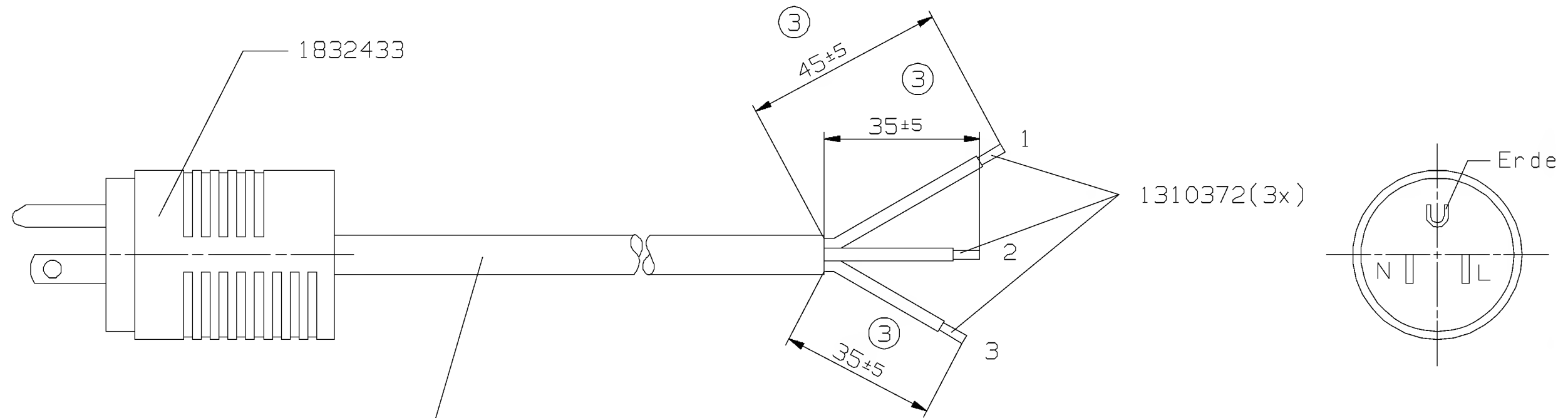


LTG SJT 3xAWG16 / CSA UL-ZUG.LV01346
(3600±10 lg)
Auf der Steckerseite
Mantel um 45 mm abgelaengt,
Aderenden versehen mit
AderendhuelSEN 1310372 (3x)
Adern L+N auf 35±5 mm gekuerzt

- * Lose Teile:
2x 2M21155 Klemmbock
2x 1342363 Schraube M6x45
2x 1333062 Mutter M6
6x G12768 Sicherungsscheibe


* Montage erfolgt im Endgeraet

ST2M30369

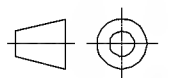

Kabel-Nr.	Kabelart		Stecker
	br,bl,gn/ge	sw,bl,gn/ge	
1	gn/ge	gn/ge	Erde
2	bl	bl	N
3	br	sw	L

scale	general tolerances	material	safety class
	+/-5		<s> 0 <m> 0
field reserved	revision text	Masze neu, Text geaendert	
filing dept	responsible dept.	author	approved
2950	5511	20.11.2000 Stickel	20.11.2000 Hartwig
type	language	date	contract
drawing	de	20.11.2000 Stickel	n
replacement for	release status	title	Dräger
2M30369-02	RELEASED	KB Hubsaeule US	
cooling system	revision index	number	Dräger Medizintechnik GmbH, D-23542 Lübeck
CADRA	03	2M30369	
	4x	01/01	size A3

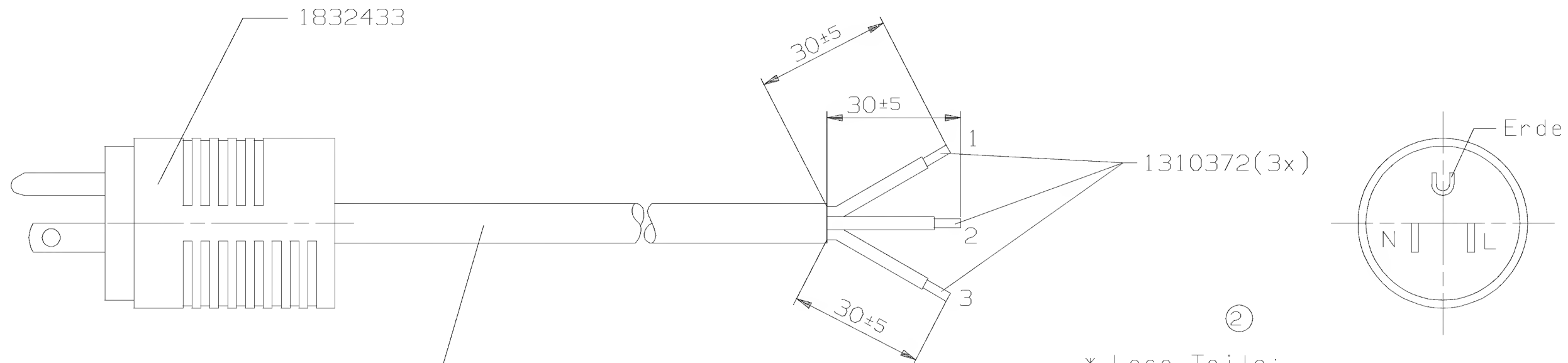

② LTG SJT 3xAWG16 /CSA UL-ZUG.LV01346
(3600±10 lg)
Auf der Steckerseite
Mantel um 35mm abgelaengt,
Aderenden versehen mit
AderendhuelSEN 1310372 (3x)

* Lose Teile:
2x 2M21155 Klemmbock
2x 1342363 Schraube M6x45
2x 1333062 Mutter M6
6x G12768 Sicherungsscheibe

* Montage erfolgt im Endgereat

ST2M30369

Kabel-Nr.	Kabelart		Stecker
	br,bl,gn/ge	sw,bl,gn/ge	
1	gn/ge	gn/ge	Erde
2	bl	bl	N
3	br	sw	L

=QA=		--	=QB=		--	=QC=		--					
Werkstoff ---						02	2x	lose Teile hinzugefuegt					
								Laenge geaendert					
												(102/97)	
						Aend. Ziffer	kommt vor	Aenderungen					
Maszstab		Allgemein- toleranzen		Abteilung		1997	Tag	Name		Drägerwerk Aktiengesellschaft Dräger			
1 : 1		---		M2		Bearb.	22.09.	Schweder					
						Gepr.	22.09.	Preiniger					
							--	--					
Benennung KB Hubsaeule US mains cable						Zeichnungs-Nr. 2M30369							
						Ersatz fuer 2M30369-00							
						Ersetzt durch							
PROD		CADRA=8											